

Sistema de radiofrecuencia

C SKL-250

Manual de instrucciones



¿Qué es RF?

Se llama diathermy(deep heating), que es el sistema proporcionar tratamiento mediante la generación de calor dentro de la cuerpo humano.

Principio de RF



Cura natural
e inmunidad
aumentado

Características de RF

Solution to the
DC current
shortcoming

Ancho de oscilación es muy corto.

Casi ningún movimiento de ion de la
componentes del cuerpo humano.

Ninguna reacción química eléctrica y electrólisis.



Solution to the
Low frequency
shortcoming

Corto período de pulsación

Ninguna simulación de los nervios sensoriales;
contrató a los nervios motores no para conducir a los músculos.
(eléctrica-acupuntura - efecto con miles de estimulación
sin fatiga muscular o lactato acumulado)



Solution to the
ultra-wave
shortcoming

No piezoeléctrico

Aplicable a los ojos y cabeza

Efectos de RF

Aumentó la dermis
temperatura y
funcionalidad de celda

aumentar hasta 45 ~ 60 en la hipodermis y tejidos musculares.

Aumentado
circulación sanguínea

Aumento de flujo de capilares sanguíneos por 4 ~ 5 veces, Aumentar en materiales de metabolismo purificar el oxígeno, linfáticos, anticuerpo, leucocitos y materiales nutritivos circulación.

Mayor elasticidad
de la
tejido de fibra de colágeno

Mayor elasticidad por 5 ~ 10 veces en el músculo, ligamento, cápsula especial y tejido de cicatriz. Máxima elasticidad sin dañar los tejidos 45-60 de la temperatura local de colágeno.

Notable reducción
en Anquilosis

En comparación con la terapia fría, terapia de calor reduce la Anquilosis y molestias

con el alivio
del dolor

Dolor por la enfermedad coronaria: alivia el dolor con la hiperhemia sonda termoelectrica. Aumentado calentando el dolor regional o los nervios periféricos, aliviar el dolor en el ligamento de músculo y tejido alrededor de la articulación.

Relajar la
contractura muscular

La contractura muscular de relajación reduciendo la explosión de alfa fibra nerviosa motora



Promoción de la
crónica inflamatoria
tratamiento

Aumento de oxígeno, nutritiva, leucocitos y anticuerpos promoviendo la circulación por vía intravenosa y ayudar a la absorción del Fibroma inflamatoria

Promueve la herida
tratamiento

Ayudar a la extensión de la arteriola y capilares sanguíneos para mejorar la circulación en la piel y a promover el tratamiento de acuerdo con el aumento del flujo sanguíneo

Precauciones

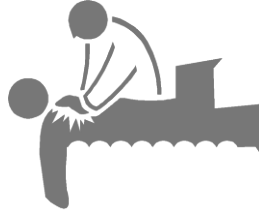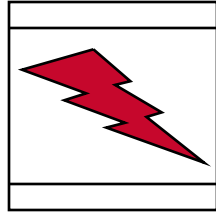

Ningún contacto permitido
Sin uso en el
para planta eléctrica electrólisis y placa

Ningún contacto permitido
para el cliente
y administrador

Restringidos en vistiendo
los materiales metálicos

No pueden utilizar los siguientes clientes

1. En caso de tener el equipo de corazón artificial
2. En caso de tener los materiales metálicos en el cuerpo humano (incluyendo el retenedor de dientes)
3. En el caso de la mujer embarazada o la posibilidad de que el embarazo
4. En el caso de la hemorragia causada por la sería u operación (excepto para el caso de la sangre se detiene)
5. En caso de los pacientes con presión arterial alta
6. En el caso de la ruptura de los vasos sanguíneos con hermorhage y tal posibilidad
7. En el caso de la paciente con inflamación aguda, profunda vena trombosis, bocio, asma, el cáncer y así sucesivamente.
8. En caso de estar en el período de menstruación

Breve introducción de las partes

Sondeos de electrodo



Por favor, deje que toda la parte de la piel utilizando el tamaño adecuado. Por favor, Tenga cuidado de no causar la daños en el aislamiento revestimiento para permitir que la alta actual para el cuerpo y mantenerlo en limpiar después del uso con 95 % alcohol

Placa



Le pegan al cuerpo humano.
En caso de contacto de la placa no adecuada y permitiendo la actual en el cuerpo humano, puede tener la lesión por el calor de la placa.

Breve introducción de las partes

Sonda de cara




Poner la sonda más pequeña para la cara y la cabeza en el agujero de la cara del panel, con la línea roja completamente dentro del agujero.

Sonda de cuerpo



Poner la sonda más grande para el cuerpo en el cuerpo agujero del panel, con el rojo de línea completamente dentro del agujero

Cómo instalar

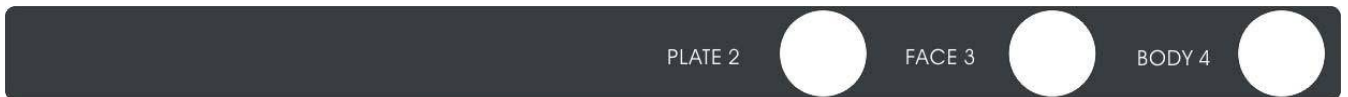


Placa 2: conectar el panel negativo

Cara 3: conectar la sonda de cara

Cuerpo 4: conexión de la sonda de cuerpo

Panel de control

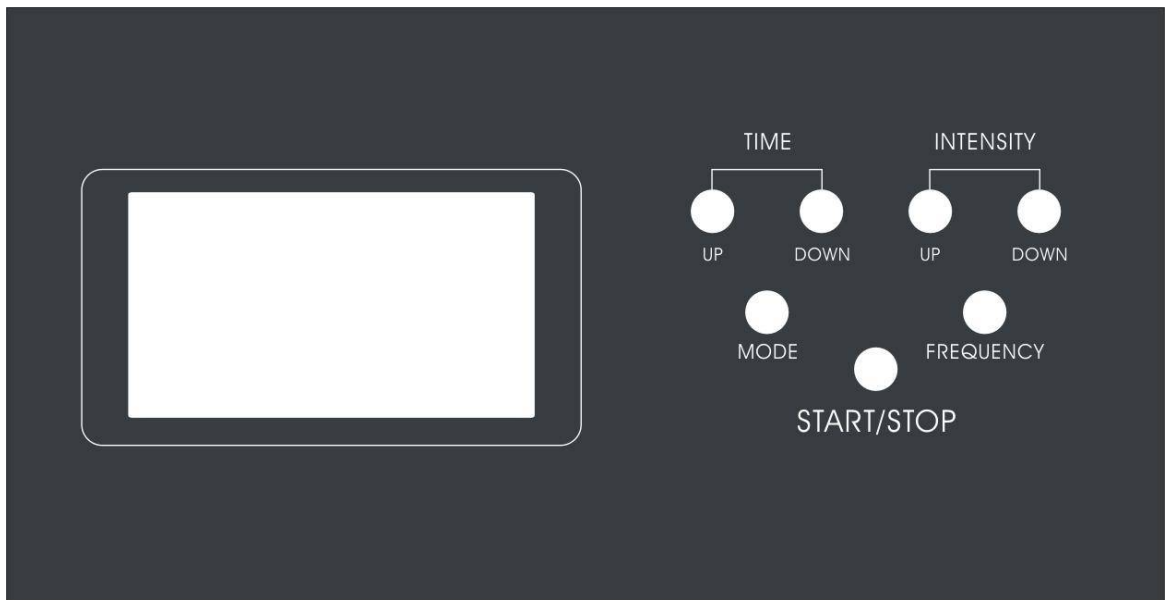

TIEMPO: Presione \"Hasta\" o \"Abajo\" para ajustar el tiempo de funcionamiento. Rangos de 01 a 30 minutos. Pulse una vez para aumentar o reducir 5 minutos.

INTENSIDAD: Cuando está en estado de inicio, pulse \"arriba\" o \"abajo\" para ajustar intensidad de la energía. Rangos de 01 a 10. Recomendar el inicio de 02 y ajuste hasta que la energía es correcta.

MOME: Presionar \"MODE\" para seleccionar la salida adecuada para un tratamiento diferente. Modo1 coincide con 0,5 m y es para el tratamiento de cabeza. MODO 2 partidos con 0,5 m y es para el tratamiento de la cara. MODE3 coincide con 0,3 m y es para el tratamiento del cuerpo. Si el modo coincide con la salida de frecuencia mal y no funciona.

FRECUENCIA: Presione \"Frecuencia\" para seleccionar la salida m 0,3 o 0,5 M.

START/STOP: El botón \"start/stop\" para cambiar su estado de funcionamiento.

Cómo operar

1. Estrechamente pegarse la placa debajo de la piel y asegúrese de que es plenamente contacto de lo contrario, hará calor quema.
2. Gire el interruptor de encendido en la parte derecha de la máquina.
3. Seleccione la cara o el cuerpo.
4. Seleccione la sonda electrodo y ponerlo en la pieza de mano derecha.
Elija el electrodo que puede asociarse estrechamente a su piel según la parte regional
5. Aplicar la crema de mensaje en la parte regional de su piel.
6. Ajustar la salida.

CUIDADO DE ROSTRO

Efectos principales

- ◆ Rejuvenecimiento de piel
- ◆ Atención de acné
- ◆ Atención especial ojo, círculo de ojo negro
- ◆ atención de drenaje linfático
- ◆ Atención de labio

Precauciones

- ◆ Dado que puede ser peligroso con flujo de sangre repentino en su cabeza o f
as, si eleva a la dirección de la cabeza, por favor asegúrese de que
bajarla a la baja.
- ◆ En caso de tener la hidropesía facial, como es causada por la
fluidos corporales congestionadas, la hidropesía se convierte en empeorar cuando se
en la parte de un edema.
En este caso, por favor tratar primero con la oreja, el cuello y los ganglios linfáticos
para penetrar en el bloqueo.
- ◆ No utilizar con calor, pero con calor leve.
- ◆ El control de la circulación de linfa es la base. Por favor, aplicar naturalmente
por fusión la crema.

Cómo operar

- ◆ En cuanto al tratamiento de la cara, hacer primero la línea central hacia la derecha y la izquierda cara la sección y, a continuación, administrar desde la línea central en la dirección del punto de linfáticos faciales.
- ◆ Si administra la dirección adversos de la linfa (oreja → nariz, línea de centro), hace que el flujo hacia atrás de la linfa y Usted tendrá el rostro hinchado.
- ◆ Sobre las partes detalladas (incluida la nariz, piezas angulares, borde del ojo etc.), finalice con la sonda pequeña electrodo.
- ◆ El administrador no debe dar la fuerte presión sobre el Sondeo de electrodo.
- ◆ Suavemente y lentamente girar la sonda electrodo con calor leve (temperatura conveniente) en lugar de calor.
- ◆ Al mover la sonda electrodo desde el centro hacia el exterior, por favor haga lentamente en forma de espiral y volver rápidamente a la recta distancia al volver.
- ◆ Adjunte estrechamente la uno mano sin electrodo en el cliente cara o parte regional y, a continuación, mover al igual que el masaje en el mismo dirección del electrodo al mismo tiempo. En este momento, es el temperatura adecuada para el cliente Si sientes la moderada grado de calor en la Palma.
- ◆ Nunca estar expuesto al viento frío como lavarse la cara en agua fría, ventilador eléctrico o acondicionador de aire, etc..

CONTROL DE GRANO

Cómo operar

1. Continuar la limpieza. (Doble lavado de cara con el agua caliente o vapor)
2. Aplicar la cantidad adecuada de crema.
3. Separa la región de la cara por la izquierda y la derecha, para controlarla suavemente con calor moderado de la parte central en la dirección del punto de ganglios linfáticos.
4. En el caso de que no se mueve el electrodo bien debido a la mezcla de material de desecho y Este es el proceso donde el material de desecho drenar los del cuerpo y repetir aplicar varias veces hasta que se siente suave.
5. La parte de la nariz o doblado parte debe controlarse después de cambiar a la pequeña Sondeo de electrodo.
6. Por favor limpiar crema lejos de la sonda de electrodo con agua caliente.
7. Después de eso, terminar con el tóner de piel.

Operación técnica

◆ Control de tiempo: min. 10 ~ 15 min. √ una vez

◆ Temperatura: 40 ~ 42 (La temperatura ligeramente caliente)

◆ Método de control

Hacerlo en la misma dirección que la circulación de la linfa, agregando más tiempo en el región de grano, haciendo ligeramente más caliente que la temperatura en los ganglios circulación.

Se puede esperar del estado mayor de las huellas de grano con la hormiga-efecto inflamatorio reducir el estado de calor.

En el caso de la espinilla inflamado o pus, parece empeorar en el momento de 3 ~ 4 aplicación. Sin embargo, ya que es la región infectada en el folículo piloso rising sobre la superficie de la piel, no es nada para estar preocupados. Cuando proceda la tratamiento más de 4 veces, podrá ver el efecto.

CUIDADO DE ROSTRO

1. Inicie la limpieza. (Lavado de doble cara utilizando vapor caliente)
2. Utilizando la crema en la cara toda, trate de la misma dirección de ganglios linfáticos como el tratamiento de la espinilla. (10 minutos)
3. Cuidados intensivos con leve temperatura más fuerte sobre todo para la región con mucha grasa subcutáneo.
4. Después de la atención de la crema, por favor, limpiarlo de la sonda de electrodo con agua caliente. o alcohol de 95%.

OJO ATENCIÓN

Es de la misma manera como la cara general cuidado y por favor cuidado el parte protuberantes bajo los ojos del interior a la parte externa de la corredera forma. En este momento, no deje que la crema en los ojos y aplicar el pequeño cantidad de crema varias veces.

ATENCIÓN DE ARRUGAS

Es de la misma manera como la cara general cuidado y por favor mezcla y Utilice la crema y nata activar como en el impulso de elasticidad. Poco a poco cuidado y aplicarlo en la luz y deslizamiento forma, teniendo en cuenta la dirección de músculo y arrugas. Especialmente para las arrugas alrededor de la boca, es más eficaz poner la lengua de dentro a fuera.

CUIDADO DE DECOLORACIÓN DE ROSTRO

1. Inicie la limpieza. (Lavado de doble cara utilizando vapor caliente)
2. Aplicar la crema.
3. Continuar la atención de la misma manera como en la atención de la espinilla.
4. Cuidados intensivos se necesita especialmente para la decoloración severa.
5. En este momento, en el caso de la decoloración alrededor de los ojos, por favor cuidado con el electrodo en la forma de deslizamiento suave desde la parte interior pa el exterior porque no hay posibilidad de si sólo las arrugas poner la fuerza sobre el electrodo.
6. Después de la atención, por favor, limpiar la sonda electrodo con agua caliente o alcohol de 95%.
7. Por favor, asegúrese de utilizar la crema UV después de terminar tratamiento.

ATENCIÓN DE LA PAPADA

- ◆ Es de la misma manera como la cara general cuidado y utilice y mezclar la crema y nata activar como cuidado de rostro
- ◆ Especialmente para la papada, deje que el cliente la barbilla retiró y, a continuación, las regiones desde abajo del cuello a la barbilla en la dirección de los ganglios.
- ◆ Es el punto importante de la atención para recuperar la elasticidad de la piel y para eliminar las innecesarias acumulado grasa mediante la activación de la la fibra de colágeno y elastina fibra y aumentando el flujo sanguíneo.

CUERO CABELLUDO CUIDADO

Cómo operar

1. Después de dejar que el cliente se encuentran en uno es el estómago, al aplicar la Crema de conducción eléctrica totalmente si la región lumbar es amplia y grueso.
2. Proporcionar la atención haciendo forma espiral desde la parte de la columna vertebral al hombro de acuerdo al centro.
3. Proporcionar la atención haciendo pequeño círculo la región escápula desde arriba a la baja.
4. Atención a su vez la región muscular trapezoidal en derecha e izquierda.
5. En caso de hipertensión arterial, no importa la región posterior del cuello. Si no presión arterial alta, es posible cuidar el cuello espaldo y copia de parte de las orejas.
6. Limpie lejos la crema cuidadosamente con toallas calientes.
7. Para la región de pelo caído del cuero cabelludo, rociar el spray de cuero cabelludo región.
8. Utilizando el electrodo, girarlo lentamente.

Técnica de operación

- ◆ Tiempo de atención: 10 minutos ~ 15 min. \1 vez
- ◆ Temperatura: 38 (calor moderado)
- ◆ El cabello caído puede deberse a varias razones, pero la mayoría de los casos es el estrés o hábitos de champú incorrecto líderes en cuero cabelludo dañado y achicó poros.
- ◆ El objetivo prioritario en esta atención es abrir el paso desde la parte posterior de la cabeza.
Nunca esta atención al cliente que ha experimentado la presión alta o hemorragia cerebral o tal posibilidad de hemorragia.
- ◆ Después del tratamiento, lavar el pelo

ATENCIÓN DE MAMA

Cómo operar

1. De acuerdo con el uso, aplicar la crema de la parte inferior del cuello a la región de la axila y el pecho.
2. Con los brazos planteados, proporcionar la atención desde la parte posterior a la dirección al centro de la axila.
3. Con el cuerpo tumbado, proporcionar la atención de la parte debajo del cuello a el ymphocyte en la dirección de la axila.
4. Partir alrededor del pecho y luego gradualmente hacia la pezón.
5. En el caso de la mama sliming, no importa la región pezón.
6. Masaje hacia fuera, alrededor del pezón.
7. Después de limpieza la crema con toallas calientes y, a continuación, aplicar la activación de crema para proporcionar el mismo cuidado durante 10 minutos.

- ◆ Desarrollo retrasado y mama desequilibrado estimulan el ovario fuertemente. En el tiempo t, como la ubicación del ovario hace el influir en el camino contrario del de mama, el desequilibrado mama estimula el ovario opuesto.
- ◆ En el caso de la mama inclinada, proporcione la unidad de cuidados intensivos la parte central de la pectoral mayor debajo del cuello, pectoral menor muscular, músculo Serrato menor en la axila y parte adyacente alrededor del músculo pectoral mayor.
- ◆ Pueden esperar el efecto reafirmante si sube el pecho juntos Cuando el cliente levanta los brazos por encima de la cabeza, permanente Recto.
- ◆ Para maximizar el efecto después de la atención, por favor, estimular en la camino masaje con otra, de acuerdo al movimiento de el electrodo.

TRATAMIENTO CORPORAL

Cómo operar

1. Beber el agua tibia después de atención.
2. El organismo nunca debe ser expuesto a la ducha de agua fría o aire frío.
3. Después de tomar el sueño en el estado conveniente, limpiar a la crema con ducha caliente o toallas calientes.
4. Se puede esperar más rápido efecto, después de la ducha de agua caliente antes de la atención.

Técnica de operación

◆ Atención de ganglios linfáticos

1. Inicie desde cerca del corazón → dirección más distantes
2. Cara: volver la cabeza cara → → cuello
3. Cuerpo: cuello → brazo pit → mano → ingle parte → detrás de la pie de rodilla →
4. La parte superior del cuerpo: la Palma → de la arm \ "espalda → → cuello → b

◆ Resolución grasa


Presión y estimulación fuerte control la tolerable temperatura máxima.

◆ estimulación del punto de acupuntura

Arreglar el electrodo y estimular segundos sobre el región de punto de acupuntura.

◆ Atención de elasticidad

Estimular suavemente la dirección muscular.

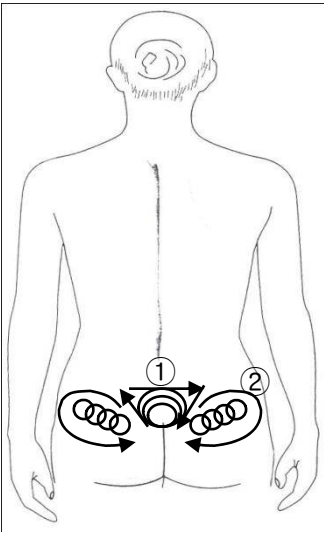


① región Sacro

Estimula el calor como en una forma profundo haciendo círculo pequeño, media y grande.

② Región de la pelvis

Estimula el calor profundo en una forma de hacer la forma de espiral hacia el exterior de la pelvis.

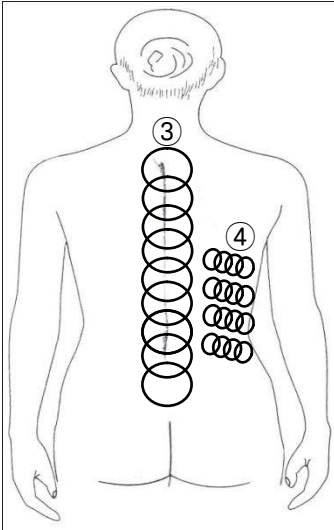


③ región Sacro

Estimula el calor profundo como en una forma de hacer pequeño círculo de media y grande.


④ Región de la pelvis

Estimula el calor profundo en una forma de hacer la forma de espiral hacia el exterior de la pelvis.

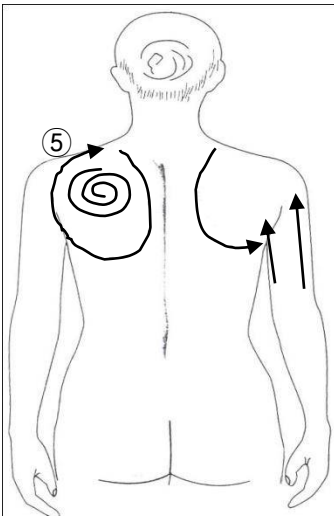


⑤ Masajeando la escápula

Presione suavemente los músculos trapecios y promover el calor profundo hacia la axila, de acuerdo con la línea de la escápula.

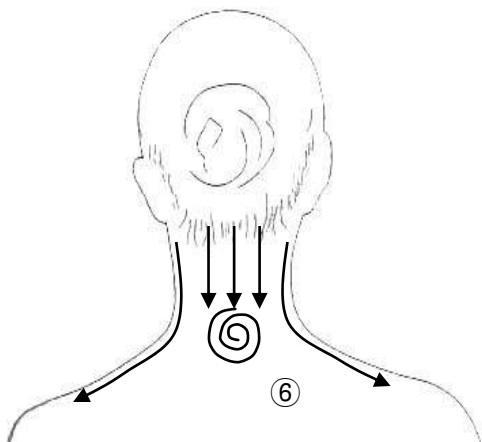


⑥ Masajeando la cervical vertebrales

Reduciendo la salida n° 4 ~ 5,
promover el calor profundo de la rayita
en el cuero cabelludo de 2 cm en el no.
7 cervical vertebrales

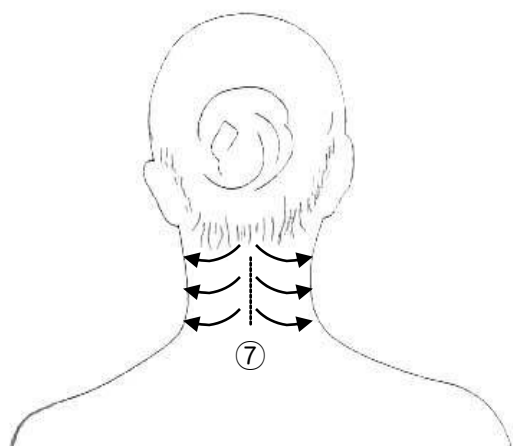


⑦ Masajeando la cervical vertebrales

Promueve el calor profundo desde el centro
de la cervical vertebral a la dirección
de la terminal

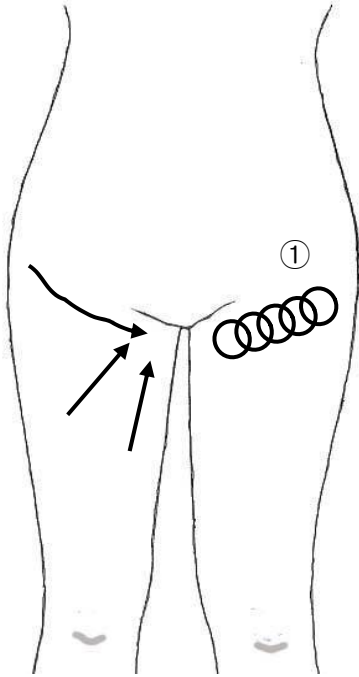

① Masajear la parte frontal de ingle

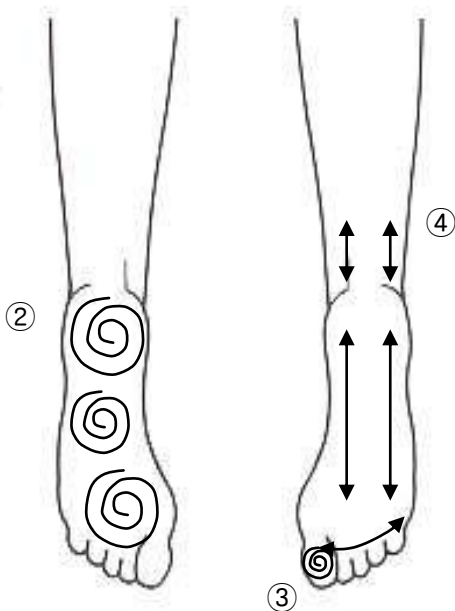


② Masajear el pie

Girar con el pie todo

Yong-cheon sanguíneo como la
Centro de manera masaje

③ Masajear los dedos del pie

④ Masajear el tendón de Aquiles

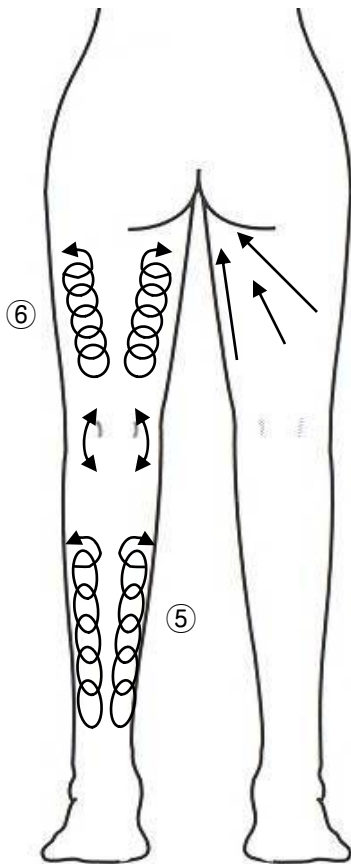


⑤ Masajear el becerro

Rodando el músculo no abdominal el forma de espiral, promover el calor profundo

⑥ Masajear el muslo


La región femoral es dividirse en en este lugar y fuera a llamar a la dirección de parte de la ingle

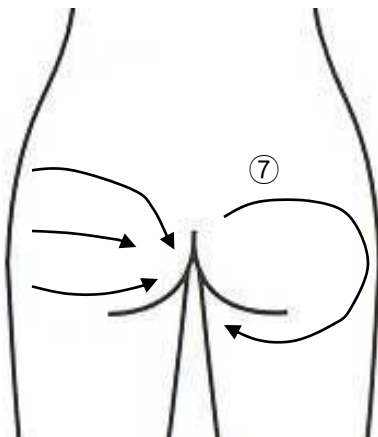

⑦ Masajeando la culata


⑧ Acabado

muslo-> ternero-> pie

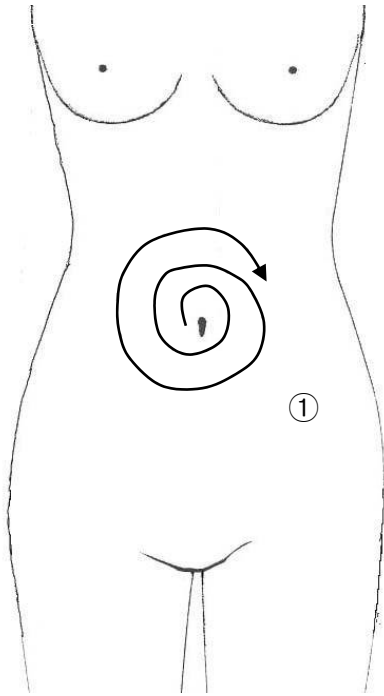


① Masajear el centro del ombligo

Promueve el calor profundo en la toma de los pequeños, medio y gran círculo desde el centro del ombligo

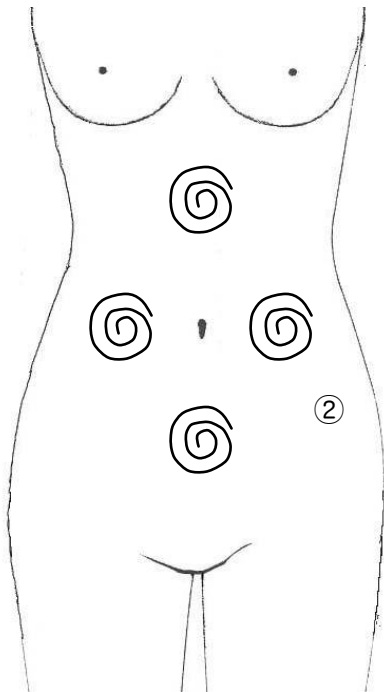


② Masaje transversal

Promueve el calor profundo en Kimoon, Chakra, la parte inferior y la sangre sacra Secuencia (forma de diamante).

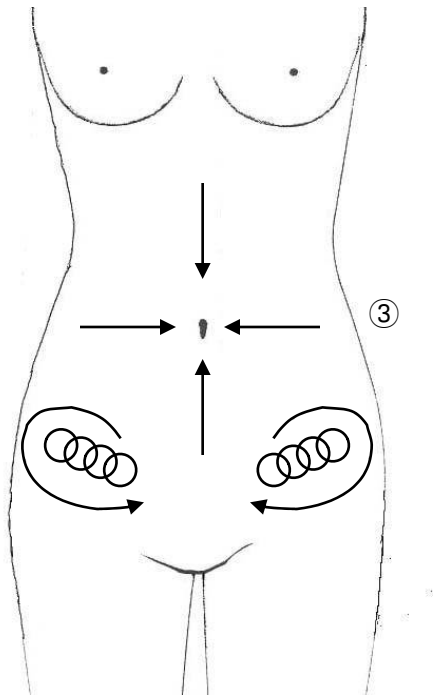

③ Masajeando la pelvis


Promueve el calor profundo, en sucesivas desde el lado de la pelvis de la paciente a la dirección de la parte de la ingle.

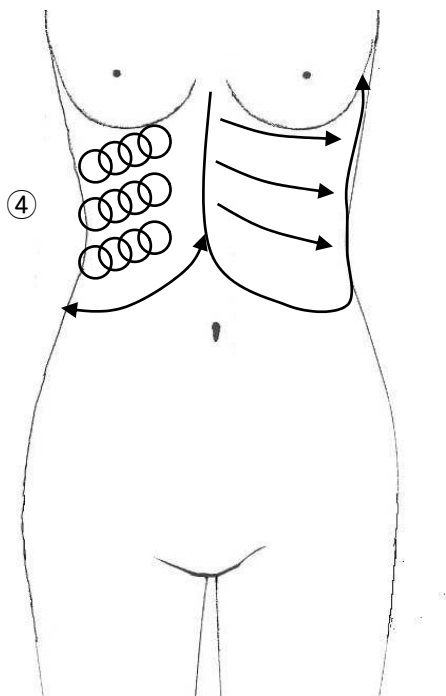

④ Masajeando la costa

Después de la limpieza del interior de la costa a los lados para llamar a la dirección de la axila.

ATENCIÓN DE MAMA

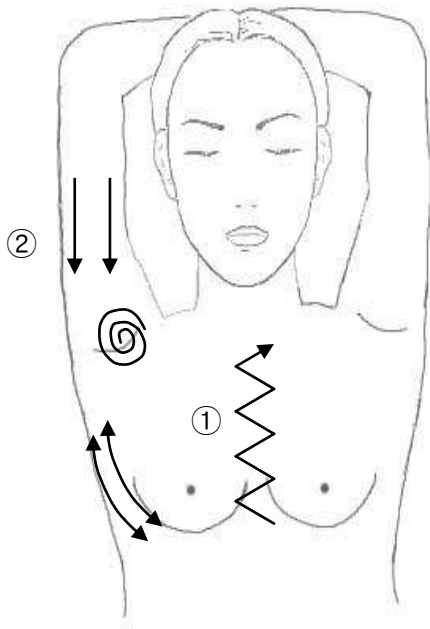


① **región de esternón**

Limpieza de la región de esternón hacia arriba, a la baja y la forma de zig zag.


② **Masajeando la axila**

Rodando la parte interna de la armas de la axila.

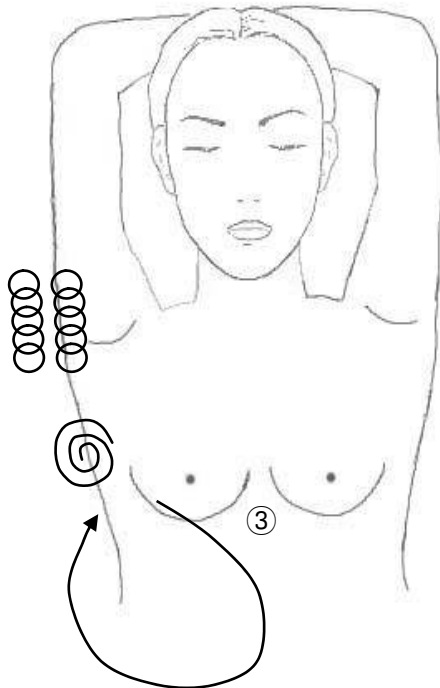


③ **Masajear el pecho**

Masaje a la mama interior (músculo pectoral mayor, menor músculo pectoral) la dirección de la axila.

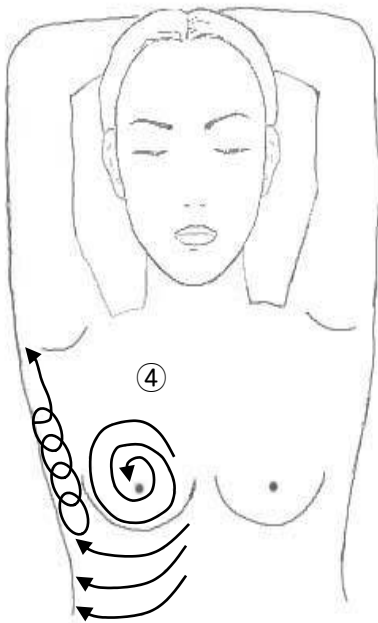

④ Masajeando la axila


Rodando a la cara interna de la mama de importante músculo pectoral para la acabado en la axila.

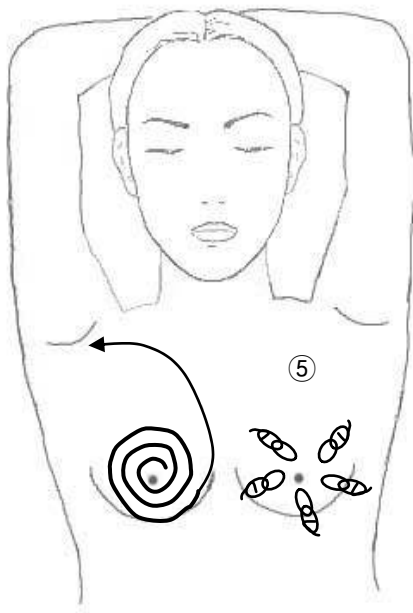

Mama sliming


Igual que antes mencionados ① ~ ④

⑤ Rodando desde el exterior a la parte interior en forma de espiral.

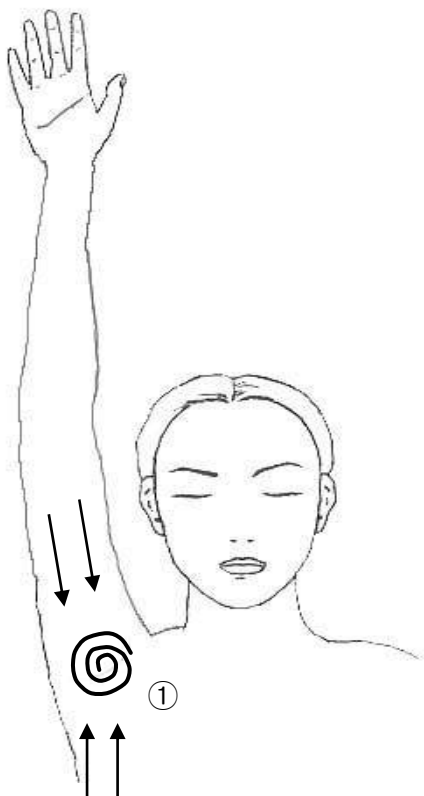


① Masaje axila

En el centro de la axila,
dibujar la parte interna del brazo
(músculo bíceps).

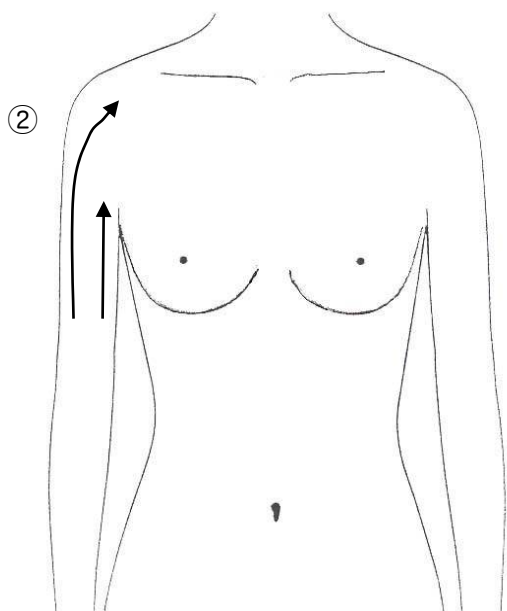


② Masajear los músculos tríceps


Masajear las líneas de la
los músculos tríceps y músculo deltoides
la dirección de la axila.

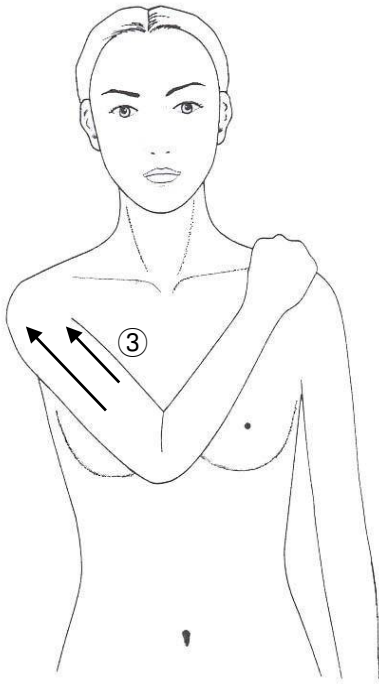

**③ Masajeando los lados de la
músculos tríceps**

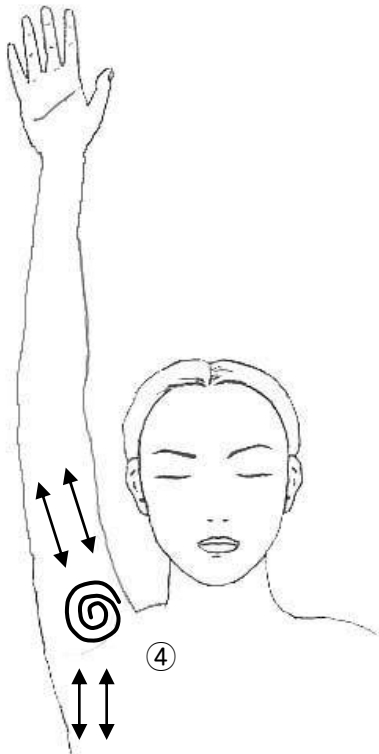

④ Masajeando la axila

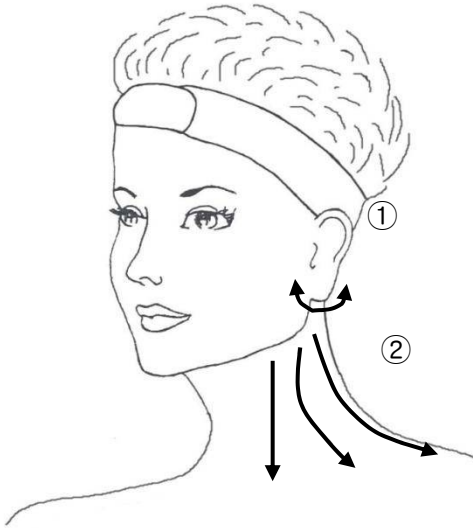


① Masaje linfático

Promueve el calor profundo por suficientemente masajeando la profuntus y parotis.


② Masaje linfático

Limpieza de la parte de la Chin a la dirección de músculos esternocleidomastoideo y los músculos trapecios

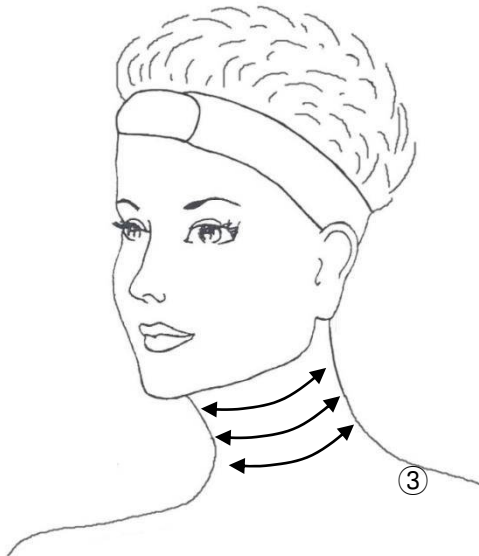


③ Aliviar las arrugas en el cuello

Alivia las arrugas de cuello excepto para las partes alrededor de la glándula tiroides

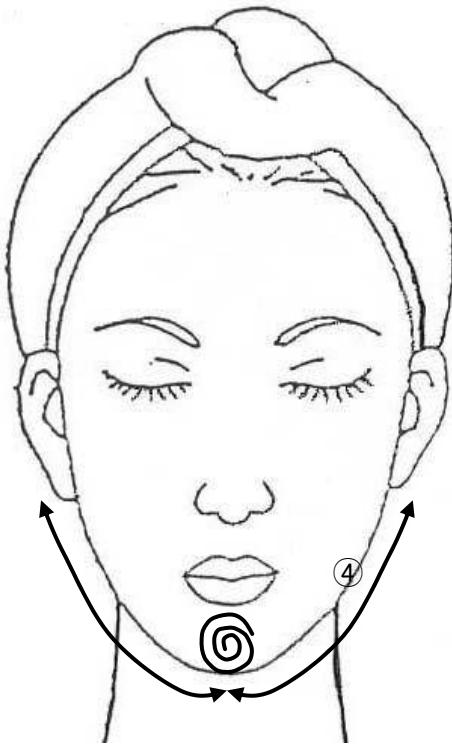

④ Promueve el calor profundo por
Masajear el centro chin
en forma de espiral


⑤ Organización desde abajo de la línea de la barba
el mentón a la parte inferior por debajo de las orejas

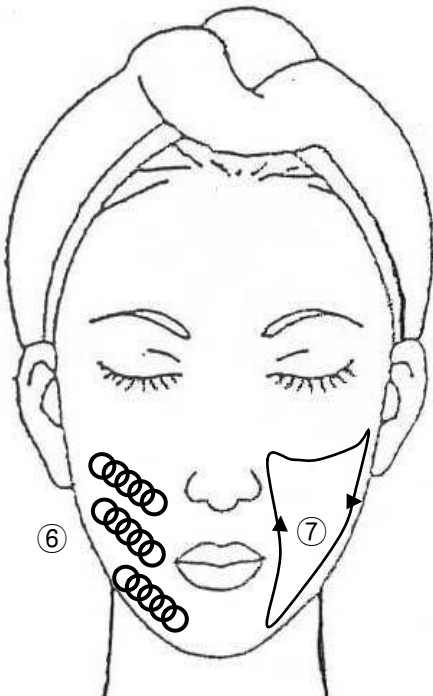


⑥ Alivia las partes de la boca en el
estructura triangular de la
entrar en la cara.

⑦ Alivia la barbilla->
partes de la boca->
-> de orejas

Chin segun el contorno de la cara.

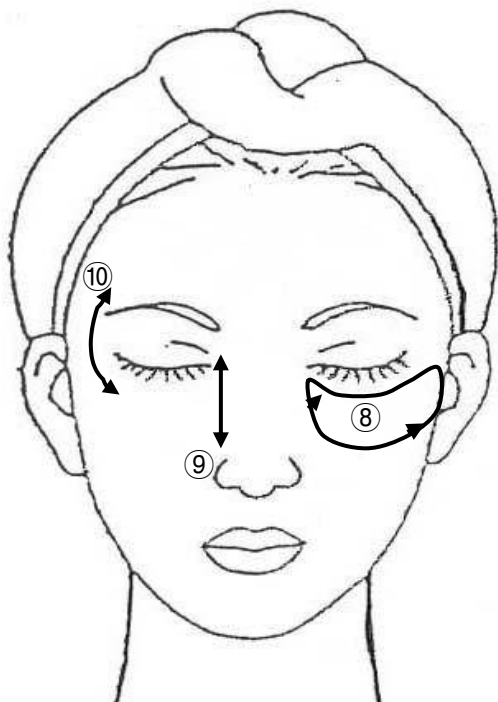

- ⑧ Masajes los contornos por debajo de los ojos, de acuerdo con el mejilla
- ⑨ Masajes las líneas laterales de la nariz
- ⑩ Masajes las partes alrededor de la ojos en forma de círculo

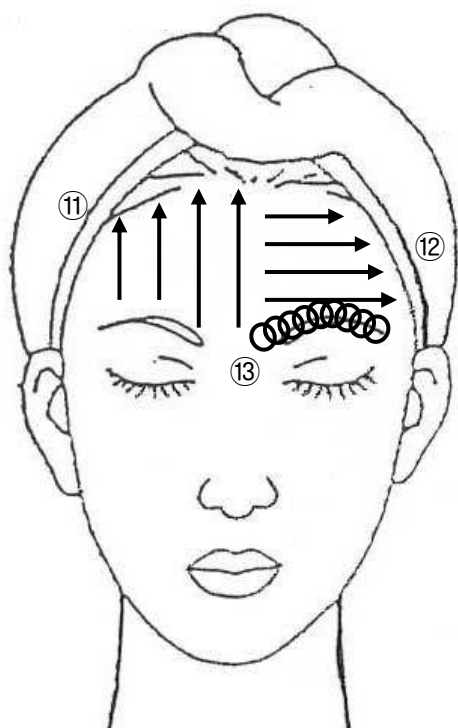

- ⑪ Limpieza de la ceja a la dirección de línea del cabello.
- ⑫ Limpieza del centro de la frente a la dirección externa.
- ⑬ Rodar con arreglo a la textura de la ceja